

Cell Cleaning System




UPUTE ZA UPOTREBU


Karta boja

Tijekom Cell Cleaning tretmana, voda će najvjerojatnije promijeniti boju, te se mogu pojaviti fragmenti stranih tvari (toksini ispušteni iz stopala u vodu). To je očekivano. Promjena boje vode u kupki je reakcija uzrokovana toksinima ispuštenim iz korisnikovog tijela, čestica u vodi, soli u vodi, materijala u sondi te kiselosti ili lužnatosti korisnika. Imajte na umu da će boja vode u skladu s navedenim reakcijama, također ovisiti i o načinu života i prehrane korisnika, kemijske čistoće vode u Vašem području te Vašem zdravstvenom stanju.

Ovisno o boji vode nakon tretmana možete vidjeti koji je organ ili dio organizma detoksiciran. Učestalost pojedine bolesti u određenoj populaciji su karakteristične za pojedine regije u državi. To je i razlog zašto će se kod detoksikacije vidljiv rezultati (boja vode) biti sličan i nakon više tretmana.

<u>Boja i izgled</u>	<u>Materijal ili organi koji su detoksicirani</u>	<u>Mogući simptomi</u>
Crna	Koncentracija teških metala Jetra, Žuč, Žučni mjehur	Diabetes, CVD, Jetra
Smeđa	Jetra, Duhan, Cellular Debris	Pušenje, Pretilost, Kolesterol, Masnoće
Tamno zelena	Žučni mjehur, Probavni sustav	Oslabljen imunološki sistem
Narančasta	Zglobovi	Artritis, Reumatizam, Giht itd.
Crvene mrlje	Krvnožilni sustav – čišćenje Od otpada koji uzrokuje začepljenje krvnih žila	Tromboza, Hypertenzija, Hladne ruke i noge
Bijeli komadići (grudice)	Mikroorganizmi	Zatvor, Nesanica, Nadutost itd.
Bijela pjena	Linfni sustav	Kožne alergije, Problematična menstruacija
Žuto - Zeleno	Bubrezi, Mjehur, Mokračvod, Prostata	Ginekološki problem, Prostatitis

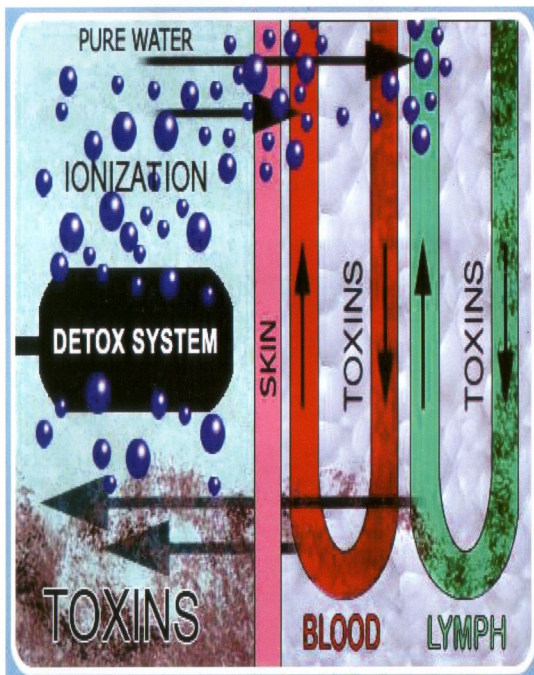

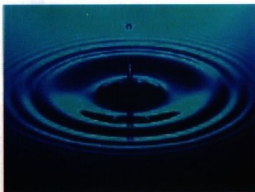

Najčešći simptomi prisutnosti toksina su:

- glavobolje, umor
- problemi s kožom, prerano starenje
- depresije, mlitavost, slabo spavanje
- sve vrste karcinoma
- loša probava, prekomjerna težina, nadutost, zatvor
- gljivične infekcije, gnojne rane
- slaba cirkulacija, povišeni krvni tlak, arterioskleroza
- arthritisi, giht, kostobolja
- dijabetes
- masnoća u krvi
- ciroza jetre
- psorijaza, parapsorijaza

UŽIVAJTE U DUŽEM, ZDRAVIJEM ŽIVOTU



Veliko nam je zadovoljstvo da ste baš Vi postal korisnik Cell Cleaning Systema. Cell Cleaning System je najnaprediji sustav za detoksikaciju, u koji je ugrađen vrhunski rezultat sinergije medicine i biotehnologije, u svrhu postizanja optimalne razine zdravlja u općoj populaciji.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Ne preporuča se upotreba osobama koje:

- imaju ugrađen pacemaker (elektro stimulator srca)
- imaju otvorene rane na stopalima
- imaju transplantiran organ
- trudnicama i dojiljama

Korištenjem Cell Cleaning Systema nisu zabilježene nuspojave. Ipak u slučaju kontraindikacija preporuka je da se posavjetujete s liječnikom.

Sustav uvijek smjestite na mjesto gdje pouzdano ne može doći u dodir s vodom. Prolijevanje vode po sustavu može dovesti do kretkog spoja i opasnosti za korisnika.

Strogo je zabranjeno u posudu s vodom u toku rada sustava stavljati bilo kakve predmete (posebno ne metalne) osim sonde. Postupanje koje nije u skladu s ovom uputom prouzrokovat će oštećenje sustava.

Zabranjeno je neovlašteno otvarati kućište sustava – može doći do strujnog udara te uzrokuje gubitak jamstva.

ZAŠTO DETOKSIKACIJA ?

Mi smo izloženi smo toksinima svaki dan, zrak koji dišemo, hrana koju jedemo i voda koju pijemo. Mnogi ljudi imaju štetne navike kao što su: pušenje i pretjerano pijenje alkohola koji ih svrstavaju u rizičnu skupinu.


Ti toksini sprječavaju sposobnost našeg tijela liječi samo sebe i izlažu nas raznim rizicima od bolesti. Kroz pravilnu detoksikaciju možemo značajno smanjiti razinu toksina u organizmu, usporiti proces starenja i prevenirati brojne bolesti i bolesna stanja.

Cell Cleaning System

Cell Cleaning System stvara prirodne i opuštajuće detoksikacijske tretmane. Proces ionizacije i osmoze pomaže tijelu da izbaciti toksine iz stanica i organa. Cell Cleaning System je produkt visoke biokemijske tehnologije u svrhu prevencije najtežih oboljenja.

Kako radi

Ion je atom koji je izgubio ili dobio elektron koji kreira magnetsko polje koje je u stanju neutralizirati suprotno nabijene čestice. Te čestice su ispuštene iz tijela tijekom procesa koji se zove osmoza. Osmoza je znanstveni pojam koji se koristi za opisivanje kretanja čestica kroz membranu iz područja niže koncentracije prema području više koncentracije.

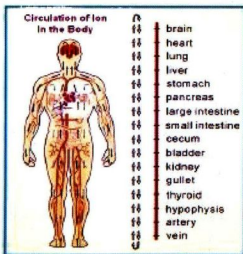

U tom slučaju područje više koncentracije odnosi se na ionsko polje koje se stvara u vodi posredstvom Cell Cleaning sonde.

Princip ionizacije

Voda u posudi za Cell Cleaning tretman je ionizirana (pozitivni ili negativni ioni). Ioni su atomi koji su dobili ili izgubili elektron, što uzrokuje uspostavu elektrostatičkog polja koje privlači i neutralizira nasuprotno nabijene čestice te ih izvlači iz tijela putem osmoze.

Oko 95% ljudi dožive stanje kiselosti, to jest, njihova tijela sadrže višak vodikovih iona i njihov pH krvi je manji od 7.45. Ti ljudi će imati velike koristi od izlaganja visokim koncentracijama negativno nabijenih iona. Međutim smatramo da će većina ljudi imati najveću korist od tretmana s pozitivnim i negativnim ionima.



Boja vode

Više boja i komadića tvari pojavljuju se u vodi tijekom Cell Cleaning tretmana. To je reakcija između toksina i čestica u vodi, soli dodane u vodu, materijala sonde te kiselosti ili lužnatosti korisnika tretmana. Na boju vode radikalno utječe razina toksina u organizmu. Otprilike 20% - 40% nečistoće u vodi su tvari koje se nalaze u vodi, a 60% - 80% nečistoće u vodi nakon tretmana su toksini iz tijela. Upravo zbog različitog mineralnog sastava i kvalitete vode potrebno je dodati sol kako bi se postiglo najbolji učinak detoksikacije.

Koristi od detoksikacije

Trenutne koristi

Nakon samo nekoliko Cell Cleaning System tretmana, biti će Vam povećana razina energije, poboljšana kvaliteta spavanja (i ako patite od nesanice), poboljšane mentalne sposobnosti i veća mentalna jasnoća i budnost.

Dugotrajne koristi

Kako napredujete s Cell Cleaning System tretmanima, osjetit ćete mnoga zdravstvena poboljšanja, kao što su:

- ✓ Pročišćava krv i spječava nastanak arterioskleroze
- ✓ Nadoknađuje manjak energije Vašeg tijela
- ✓ Pozitivno djeluje na živčani sustav
- ✓ Poboljšava metabolizam i podiže imunitet
- ✓ Jača organizam u funkciji samočišćenja
- ✓ Smanjuje pritisak na funkciju jetre
- ✓ Pomaže kod slabog rada crijeva i želuca
- ✓ Ubrzava zacjeljivanje rana
- ✓ Uspostavlja pH ravnotežu i oslobađa tijelo od viška slobodnih radikala – slobodni radikali se smatraju glavnim uzročnikom inicijacije raka
- ✓ Regulira razinu šećera i kolesterola
- ✓ Potiče limfnu cirkulaciju
- ✓ Pomaže u regulaciji krvnog tlaka
- ✓ Smanjuje simptome reume i bolnih leđa
- ✓ Pomaže kod gubitka prekomjerne težine

Raspakirajte Cell Cleaning System

Vaš Cell Cleaning System sadrži navedene dijelove:

SONDA



NARUKVICA



INFRA POJAS



T.E.N.S. ELEKTRODE



AL. KOFER



MREŽNI KABEL



Kako upotrebljavati Vaš Cell Cleaning System


MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE PRIJE UPOTREBE !

- Izvadite sustav iz pakiranja, skinite sve zaštitne plastične navlake i folije s uređaja i pribora.
- Molimo Vas da pažljivo pročitate upute o rukovanju i sigurnosti prije priključenja sustava na el. mrežu i puštanja u rad.
- Smjestite sustav na sigurno mjesto sa adekvatnim osvjetljenjem i prozračivanjem. Isto tako trebate pristup vodi, odvodu i električnoj energiji.
- Molimo Vas da se uvjerite da je selektor napona 110V/220V u položaju 220V (za HRVATSKU).
- Stavite sustav na suho i stabilno mjesto. Postavite ga na visinu koja je primjerena za rukovanje, spriječite mogući dodir s vodom.
- Koristite plastičnu posudu u koju ulijte dovoljno vode da uronite stopala. Nivo vode treba potpuno potopiti sondu.

VAŽNO: Može biti neophodno da dodate soli u vodu kako bi pospješili provodljivost. Uronite Vaša stopala u posudu s vodom, spojite sondu, stavite i priključite narukvicu, odaberite MODE i počnite tretman bez dodavanja soli. Ako je AMP nivo između 1.1 i 1.4 nije potrebno dodavati sol. Sol koristimo da dostignemo AMP nivo. Krenite s ¼ čajne žličice soli, čekajte 10-20 sec., ako AMP nivo ne dostigne 1.1 ponovite postupak sve dok ne dostignete zadani nivo.

U slučaju da dodate previše soli, sustav će se oglasiti alarmom i stati s radom. Pogledajte dijagram ljudskog tijela, strelice oko njega će se micati ako sustav radi, ako sustav ne radi neće se micati. U takvoj situaciji, zamijenite vodu i pokrenite cijeli process ponovo. **NE STAVLJAJTE NIKAKVE METALNE PREDMETE U POSUDU SA SONDOM TIJEKOM RADA UREĐAJA**

- TO ĆE PROUZROČIT UNIŠTENJE UREĐAJA !

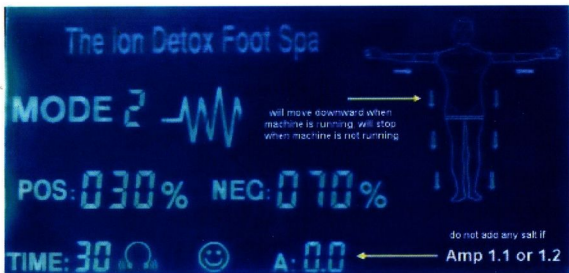

Garantni list

1. Garancija za Cell Cleaning System vrijedi 12 mjeseci i počinje teći od dana kupnje.
2. Garancija uključuje besplatnu zamjenu neispravnog dijela i popravak.
3. Popravak uređaja ili zamjena neispravnog dijela biti će izvršena u roku od 45 od primitka uređaja na popravak.
4. Originalni garantni list jedini je dokument s kojim se mogu ostvariti prava iz garancije.
5. Troškove dostave do servisa snosi kupac.
6. Garancija ne uključuje kvarove izazvane nemarom, nepažnjom, nepravilnom upotrebom (različitom od one naveden u uputama za korištenje sustava), zapaljenjem ili oštećenjenima uzrokovanim neprikladnim transportom ili skladištenjem.
7. Isključena je naknada eventualne štete izravno ili posredno trećim osobama koja bi mogla nastati korištenjem sustava.
8. Garancija glasi na kupca i neprenosiva je.
9. Ovo je jedino pravovaljano jamstvo. Niko nije ovlašten davati bilo kakve usmene ili pismene promjene.
10. Neovlaštenim servisiranjem i oštećenjem sigurnosne naljepnice gube se prava iz garancije !
11. Garancija se ne odnosi na sondu i T.E.N.S. elektrode koji se troše tijekom tretmana te ih treba zamijeniti novima nakon određenog broja tretmana.
12. Ovi uvjeti i uvjeti jamstva na kupoprodajnom ugovoru čine jednu cjelinu te čine Opće uvjete jamstva (garancije) !



Cell Cleaning System je sukladan
HRN EN 60335-1:2005+A1:2008

GARANCIJA

Ime i prezime kupca: _____

Adresa _____

Grad _____ Poštanski broj _____

Tel _____ GSM _____

Model: **CELL CLEANING SYSTEM**

Serijski broj: _____

Datum preuzimanja sustava: _____

Upute za upotrebu

1. Budite sigurni da korisnik ima stopala u vodi i da je udobno smješten.
2. Spojite narukvicu-budite sigurni da je dovoljno, ali ne pretjerano stegnuta. Možete koristiti vlažne maramice i sl. između zapešća i metalnog dijela narukvice radi boljeg kontakta.
3. Spojite sondu-koristite konektor ARRAY na prednjoj ploči sustava.
4. Stavite sondu u plastičnu posudu, budite sigurni da nivo vode doseže vrh sonde.
5. Izaberite mod tretmana pritiskom na MODE gumb. Preporuka

je da počnete tretmane u modu 1 do 3.

Mod 4 i 5 su samo za profesionalnu kliničku upotrebu !

6. Izaberite vrijeme trajanja tretmana. Cell Cleaning System je postavljen na 30 min. Da to promijenite koristite (+) i (-) gumb na prednjoj upravljačkoj ploči.
7. Da bi počeli tretman – pritisnite gumb START.
8. Sustav radi kada se oko dijagrama tijela na display-u pomiču strelice prema dolje.
9. Primarni mod tretmana bilo pozitivni ili negativni isto tako treperi. Kada POS treperi, emitiraju se pozitivni ioni, kada NEG treperi, emitiraju se negativni ioni. To će se izmjenjivati u modu 1, 2 i 3 (tretman izmjenjivanja pozitivnih i negativnih iona).
10. Kada je tretman završen, sustav će se oglasiti. NAJPRIJE skinite narukvicu, a zatim isključite sustav.
11. Izvadite stopala iz vode te ih isperite toplom vodom i sapunom tako da uklonite nečistoće.
12. Odlaganje vode s toksinima – preporuka da se baci u WC školjku i ispere više puta.
13. Temeljito isperite sondu – **POGLEDAJTE POSEBNE UPUTE ZA ČIŠĆENJE, DEZINFEKCIJU I SPREMANJE SONDE !**
14. Odspojite sondu, narukvicu, mrežni kabel i druge priključke prije nego spremite Cell Cleaning System u zaštitnu kutiju.

Preporučeni raspored tretmana

Dob 10 – 17 (20 minuta tretman)

Tretman	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MODE	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Jednom tjedno, može se ponoviti nakon 4 tjedna. Nakon prvog ciklusa 1 tretman svakih 10 – 15 dana.

Dob 18 – 50 (30 minuta tretman)

Tretman	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MODE	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3

Jednom svakih 5 – 7 dana, može se ponoviti nakon 4 tjedna. Nakon prvog ciklusa 1 tretman svakih 7 - 10 dana.

Dob 50+ (30 minuta tretman)

Tretman	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MODE	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Jednom svakih 5 – 7 dana, može se ponoviti nakon 4 tjedna. Nakon prvog ciklusa 1 tretman svakih 7 - 10 dana.

MODE 4 i 5 su isključivo za profesionalnu upotrebu !

Čišćenje i pohrana sonde

Cell Cleaning System sonda je jedna od najnaprednijih i najekonomičnijih u svojoj klasi. Sonda je jednostavna za korištenje. Napravljena je od visokokvalitetnog medicinskog nehrđajućeg čelika, te visokotehnološki obrađena da bi mogla ispunjavati svoju funkciju. Sonda ima svoj ciklus trajanja, nakon toga se mora zamijeniti. To je predviđeno i nije kvar. Ispravno čišćenje, održavanje i spremanje sonde, produljit će njenu upotrebljivost. Očistite sondu odmah nakon tretmana. koristite prirodni sapun ili slično sredstvo. S mekom spužvom očistite kućište sonde. Sondu temeljito isperite pod mlazom tople vode. Zatim ju možete staviti 15 – 20 minuta u vodu kojoj ste dodali čajnu žličicu octa, te ju nakon toga ponovo isprati vodom. Nakon toga osušite sondu (vrlo važno) te ju odložite na suho i prozračno mjesto. Nikada ne ostavljajte sondu u vodi više od 30 minuta. Uvijek držite sondu na suhom mjestu. Nikada ne otvarajte kućište sonde i ne čistite nehrđajući čelik mehaničkim sredstvima (to će smanjiti vijek trajanja ili uništiti sondu). Sonda je izrađena od materijala koji se troši u zavisnosti od sastava vode u Vašem podneblju te kiselosti/lužnatosti i razini toksina kod korisnika. Uvijek držite utikač sonde suhim.

Sonda je dio sustava koji se uranja u vodu i stvara ione. Proces koji se pritom odvija uzrokuje oksidaciju unutar sonde. To je prirodan proces koji troši metal. Da bi postigli najbolje rezultate uvijek se pridržavajte ovih uputa. Uvijek koristite čistu plastičnu posudu. **Ne koristite destiliranu i demineraliziranu vodu !**

Više o detoksikaciji

Brza hrana, loše prehrambene navike, konzervansi, aditivi, kemijski zagađeni zrak i voda, kemijski tretirane biljke koje služe za prehranu, sve je to pridonjelo zagađenosti ljudskog tijela toksinima i ukupnom slabljenju ljudskog imuniteta i zdravlja.

Mnoga danas vrlo česta oboljenja kao što su dijabetes, ciroza jetre ili čak smrtonosna kao rak, ustvari su završni stadij zatrovanosti tkiva i nisu izazvana virusima i bakterijama, nego dugotrajnim nakupljanjem otrova – toksina i kiselinskog viška u organizmu i upravo oni stvaraju stanje toksičnosti tkiva – plodnu podlogu bakterijama i virusima da zaraze ljudsko tijelo.

Najčešća kronična degenerativna stanja kao artritis, arterioskleroza i manjak imuniteta, primarno nastaju kao rezultat krvne i tkivne toksičnosti nastale nakupljanjem štetnih tvari u organizmu.

Jedini pravi način za liječenje kroničnih bolesti i degenerativnih stanja je ukloniti uzroke u korijenu, osloboditi tijelo od toksina kojikoji zagađuju krv i tkiva, te slabe imunitet i stvaraju podlogu za bakterije. Potrebno je izvršiti detoksikaciju tijela, popraviti štetne toksične učinke na vitalnim organima te obnoviti ravnotežu svih ostalih vitalnih funkcija.

Kada se tijelo i krv očiste od otrova, bakterije ne mogu napasti, degenerativna stanja se zaustavljaju a prirodni mehanizam obnavljanja tijela popravljaju nastalu štetu i optimalno zdravlje u čitavom tijelu.

Voda je sastavni dio tijela i služi prijenosu kemijskih tvari potrebnih tijelu, a isto tako i kao otapalo za štetne sastojke – toksine, koji izlaze iz tijela (znoj, urin).

Sam pojam detoksikacije označava se jednostavnom riječju ČIŠĆENJE. U ovom slučaju to je čišćenje tijela od raznih toksina koji se nakupljaju u našem tijelu uslijed raznih razloga. Najčešći razlozi su: nepravilna prehrana, stres, dugotrajno uzimanje lijekova, onečišćenja iz okoliša i slično.

Infrared Charcoal Bamboo Pojas

Bambus Infrared Pojas može se koristiti za jedno s Cell Cleaning tretmanom ili kao samostalni tretman. Ovim dodatkom zagrijavaju se veliki organi u tijelu, te tijelo povećava prirodnu sposobnost da se samodetoksicira. Učinak Infrared energije na tijelo je prirodan na staničnoj razini, te poboljšava cirkulaciju i ubrzava metabolizam u području tijela na kojem se nalazi. Korisnik da će osjetiti smanjeno grčenje mišića, povećanje protoka krvi te smanjenu ukočenost zglobova na području gdje koristi pojas. Pojas također poboljšava gubljenje masnih stanica na dijelu tijela na kojem se koristi jer oslobađa toksine iz masnih stanica.

Kako upotrebljavati Bambus Infrared pojas :

1. Uključite uređaj (prekidač na stražnjoj strani).
2. Bambus Infrared Pojas možete koristiti samostalno ili zajedno s Cell Cleaning tretmanom.
3. Gumbi na lijevoj strain gornje kontrolne ploče služe za kontrolu Bambus Infrared Pojasa.
4. Gumbi L, M, i H znače slabo (L), srednje (M) i jako (H) te se biraju gumbom MODE na GORNJOJ kontrolnoj ploči. Gumb MODE na PREDNJOJ kontrolnoj ploči služi za druge funkcije sustava.
5. ON/OFF gumb na gornjoj kontrolnoj ploči služi za uključenje/ isključenje Infrared Bambus Pojasa i T.E.N.S. – a.
6. Namjestite Infrared Bambus Pojas na mjesto koje želite tretirati. Najveći broj korisnika ga omota oko donjeg dijela leđa. Sportaši ga vole koristiti na natkoljenicama kad rade na svojim kvadricepsima i tetivama mišića, naročito nakon sportskih događaja. Ljudi koji žele izgubiti na težini omataju ga oko središnjih dijelova tijela.
7. Priključite pojas na konektor na zadnjoj ploči sustava. Gumbom ON/OFF uključite sustav.
8. Izaberite željenu jačinu L, M ili H.
9. Infrared pojas sada radi. Kada završite tretman pritisnite ON/OFF gumb kako bi isključili Infrared Bambus Pojas.

T.E.N.S.

Što je T.E.N.S.?

T.E.N.S. ili elektro stimulacija mišića je tehnika koja izaziva kontrakcije mišića dovođenjem električnog impulsa do istog. T.E.N.S. prvenstveno koriste liječnici i fizioterapeuti u svrhu prevencije ili ublažavanja mišićne atrofije, ili pospešivanja oporavka mišića. Liječnici isto tako vide T.E.N.S. kao sredstvo za povećanje protoka krvi u mišićima, povećanje opsega pokreta, povećanje snage mišića, te jačanje mišićne izdržljivosti.

Koristi od T.E.N.S. -a

Ritmicko pumpanje u mišićima, koje proizvodi T.E.N.S. jedinica pomaže dostavu hranjivih tvari i kisika u mišiće. Isto tako otpadne tvari, kao npr. mliječna kiselina, izbacuje iz mišića. To poboljšanje cirkulacije krvi kroz mišiće skraćuje vrijeme oporavka i podržava zdravu mišićnu aktivnost.

T.E.N.S. isto tako podiže temperaturu, ubrzava puls i metabolizam (potiče energiju i apsorpciju masti iz tijela).

Kako upotrebljavati T.E.N.S. :

1. Uključite uređaj (prekidač na stražnjoj strani).
2. Preporuka je da T.E.N.S. ne koristite s drugim tretmanima, ali je moguće.
3. Tri desna gumba gornjoj kontrolnoj ploči služe kontroli T.E.N.S. – a.
4. Uklonite zaštitne folije s T.E.N.S. elektroda, te iste stavite na željeno mjesto (mišić). Priključite kabel s elektrodama u odgovarajući konektor na prednjoj kontrolnoj ploči.
5. Pritisnite ON/OFF gumb NAKON što ste stavili elektrode na željeni mišić.
6. Pritisnite IMPULSE gumb da bi izabrali snagu – postoje 4 nivoa. UVIJEK PRVO IZABERITE NAJSLABIJI NIVO, nakon toga možete eventualno izabrati viši nivo snage. Budite pažljivi s odabirom nivoa snage – budite umjereni !
7. Kada završite s tretmanom pritisnite ON/OF gumb jedanput (isključite uređaj) prije nego što skinete elektrode. UVIJEK ISKLJUČITE UREĐAJ PRIJE NEGO ŠTO DODIRUJETE ELEKTRODE !

Česta pitanja i odgovori

1. Tko ne bi trebao koristiti Cell Cleaning System ?

Trudnice, dojilje, osobe s transplantiranim organima, osobe s pacemakerom (elektrostimulatorom), osobe s kongestivnim zatajenjem srca, osobe s otvorenim ranama na stopalima, osobe s epilepsijom.

2. Zašto bi trebali koristiti Cell Cleaning System?

Ima mnogo razloga zašto trebate koristiti Cell Cleaning System. Načelni razlog je da je Cell Cleaning System brz, učinkovit i bezopasan način poticanja i balansiranja bio-energetskog polja tijela, poboljšanja funkcioniranja organizma te visoko učinkovit sustav detoksikacije tijela. Ako imate 50, 60 ili 70 godina, onda ste mnogo godina dovodili organizam u sadašnje stanje zdravlja i toksičnosti. Preporuka je da slijedite redovne i kontinuirane Cell Cleaning System tretmane i detoksikacijski program.

3. Zašto se ne pokazuje amperaža na displayu?

Ako narukvica nije propisno stavljena, sustav na funkcionira. Uvjerite se da je narukvica dobro postavljena (metalni dio mora biti na koži) i dobro stegnuta. Provjerite kabel te da li je konektor priključen. Ako je potrebno, koristite vlažnu papirnatu maramicu ili slično između metalnog dijela narukvice i zapešća.

4. Da li ja mogu namjestiti voltažu? Ne - voltaža ne zahtijeva namještanje.

5. Čemu Cell Cleaning System pomaže ?

Cell Cleaning System pomaže oslobađanju i izbacivanju toksina iz organizma da bi se pomoglo organizmu da dođe u balans, koji potiče i promiče detoksikacija. Organi s niskim nakupinama toksina mogu se vratiti u normalnu ili poboljšanu funkciju.

6. Smiju li ljudi koji primaju hormonsku terapiju koristiti Cell Cleaning System?

Da, to pomaže da bi umanjili, pa čak i uklonili nuspojave i otrovne ostatke, ako je potrebno, od lijekova i liječenja.

7. Hoću li trpjeti bilo kakve nuspojave od tretmana ?

Kako je svatko drugačiji i odgovor na tretman će se razlikovati. Općenito govoreći nećete trpjeti nikakve štetne nuspojave vezane uz tretmane. Neki korisnici mogu imati blage glavobolje ili osjetiti umor nakon nekoliko prvih tretmana. Ti simptomi su dokaz da toksini napuštaju organizam. Povećajte unos vode u organizam, dobro se odmorite, ne izlažite se velikim naporima dok ste u detoksikacijskom programu.

8. Je li dugotrajno korištenje štetno ?

Ne. Budući da smo neprestano izloženi toksinima u vodi, zraku, hrani i okolišu uvijek postoji potreba da detoksiciramo naše tijelo.

9. Mogu li piti vodu tijekom terapije? NE! Nemojte nikada piti vodu tijekom terapije.

10. Trebam li ukloniti nakit i električne uređaje, mobitel i slično?

To bi moglo ometati pravilan rad sustava. Preporuka je da se skine nakit i odmaknu električni uređaji, naročito s jakim zračenjem (mobiteli).

11. Zašto osjećam bockanje ili laganu bol ?

Pojave mogu biti u vezi bio-elektromagnetskog polja koje generira Cell Cleaning System, koje se apsorbira i koristi od strane tijela, organa i tkiva. To je oslobađanje bio-električne blokade. Još jedanput pokazuje efektivnost procesa i tretmana. Ako osjećaj postane neugodan, prekinite tretman i ponovite ga nakon dva – tri dana. Ako treba povećavajte razmak između tretmana dok Vam ne bude ugodno. Preporuka je popiti vode PRIJE Cell Cleaning tretmana.

12. Zašto voda mijenja boju?

Voda mijenja boju u reakciji zavojnica sonde, soli i minerala u vodi te individualnog doprinosa pojedinca (to je ono što uzrokuje razlike između više korisnika). Molimo Vas da pogledate grafikone boja na str. 2 za analizu boja i toksina u vodi.

13. Zašto preporučamo toplu vodu?

Možemo koristiti hladnu vodu, međutim topla voda je mnogo ugodnija te otvara pore na stanicama koje ubrzavaju ionsku aktivnost i daju bolje rezultate tretmana.

14. Što da napravim s vodom nakon detoksikacijske terapije?

Vodu nakon tretmana bacite u odvod (WC) te isperite odvod i posudu.

15. Kada će moja voda biti čista?

Na nesreću, mi živimo u toksičnom svijetu i Vi unosite toksine svaki dan u svoj organizam. Nakon prve serije tretmana, važno je obavljati tretmane po navedenom rasporedu radi prevencije ponovnog nakupljanja velikih količina toksina.

16. Zašto se osjećam umorno nakon terapije?

Svatko ima svoj ciklus aktivnosti i odmora, te ako on slijedi sličan uzorak ne bi trebalo biti promjena. U nekim slučajevima bioelektrična stimulacija može proizvesti osjećaj umora zbog obnavljanja nekih energija te izmjene drugih. U drugim slučajevima možete se osjećati stimuliranim " napunjenih baterija ", osjećati se više energičnijim i budnijim. Naša tijela se obično obnavljaju tijekom spavanja. Ako osjećate umor nakon tretmana preporuka je da koristite Cell Cleaning System popodne ili navečer, tako da možete dati svojem tijelu ono što zahtijeva. Ako se osjećate puni energije, preporuka je da tretman radite ujutro ili u rano poslijepodne.

Pročitati

Hvala Vam što ste postali dio Cell Cleaning System programa. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute prije uključivanja i upotrebe Cell Cleaning Systema. Ove upute će Vam pomoći da razumijete princip djelovanja Cell Cleaning Systema, te će Vam odgovoriti na najčešća pitanja.

Svatko je različit. Cell Cleaning System je podešen da odgovara 99,8% populacije. Molimo Vas da pažljivo slijedite upute kako bi postigli najbolje moguće rezultate. Molimo Vas da obavezno slijedite upute za sigurnu upotrebu sustava.

VAŽNO: Ništa ne može zamijeniti stručno mišljenje i dijagnozu Vašeg liječnika. Ništa ne može zamijeniti medikamente (lijekove) koje Vam je prepisao Vaš liječnik. U slučaju neželjenih nuspojava hitno se javiti Vašem izabranom liječniku !

Cell Cleaning System namijenjen je detoksikaciji i preventivnom održavanju tijela za iniciranje sposobnosti odbacivanja toksina i samo balansa stanica. Uz djelovanje ovog sustava za detoksikaciju može te jednostavno i učinkovito poboljšati zdravlje Vašeg organizma.

Slike napravljene tijekom Cell Cleaning tretmana



Početak



Nakon 10 min



Nakon 20 min




Nakon 30 min

Dark-field studije su pokazale da Cell Cleaning System podiže razinu kisika.

Slijedi analiza krvnih stanica: na slici lijevo je slika krvne stanice prije tridesetminutnog Cell Cleaning tretmana. Na slici desno je slika krvne stanice nakon tridesetminutnog Cell cleaning tretmana !



Krvna čelija prije

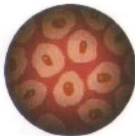

Krvna čelija poslije